


ChattyInfty3 Ver3.07d 修正項目

2016/06/07


1. ルビの表示変更

ルビ設定画面の「表示レベル設定」で「自動設定」以外を選択すると、編集画面でルビに色付きで表示するようになりました。

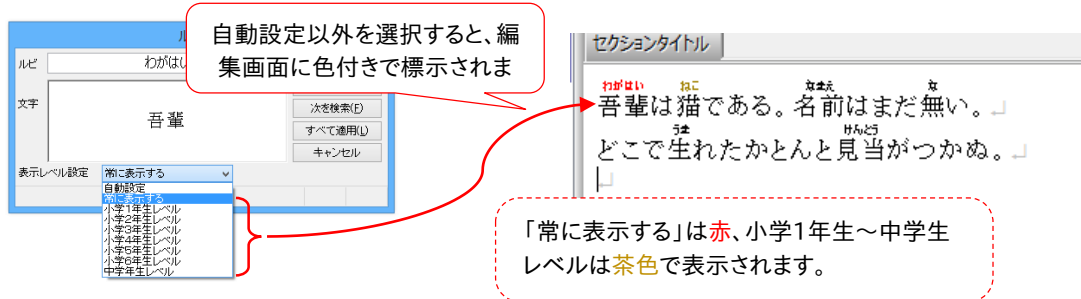

2. 選択範囲のルビ削除

複数のルビを含む範囲を選択してルビ設定操作(Shift+Ctrl+↑)を行うと下図のように「**選択範囲に複数のルビがあります。全てのルビを削除しますか?**」というメッセージが表示されます。

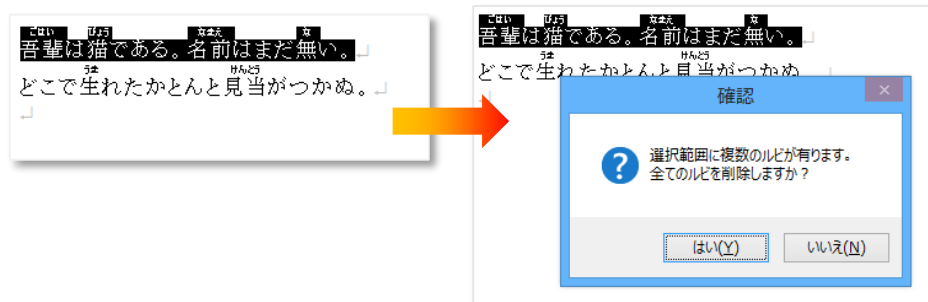

「はい」をクリックすることにより、選択範囲の全てのルビを削除することができます。

選択範囲にルビがない(これからルビを設定する)場合や、1つかしルビがない(ルビの変更する)場合は、従来通りにルビ設定画面が表示されます。


3. プロキシ通信設定機能

ChattyInfty3AITalk版では英語音声を利用するためにインターネット通信を行っています。


企業や大学などの場合はプロキシサーバーを経由して通信する必要がありますので、下記のプロキシ設定をおこなってください。

※ 通常の状態では音声が出ていれば設定する必要はありません。また設定を間違えると音声が出なくなるなどの現象が発生しますので十分に注意して設定してください。


- (1). ディスデスクトップの「ChattyInfty3 AITalk」のアイコンを右クリックして、「ファイルの場所を開く」をクリックします。

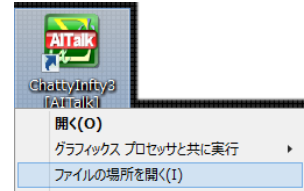

- (2). ファイルエクスプローラでChattyInfty3のプログラムの場所が表示されますので、_italk.iniもしくはaitalk_s.iniをメモ帳などのテキストエディタで開きます。

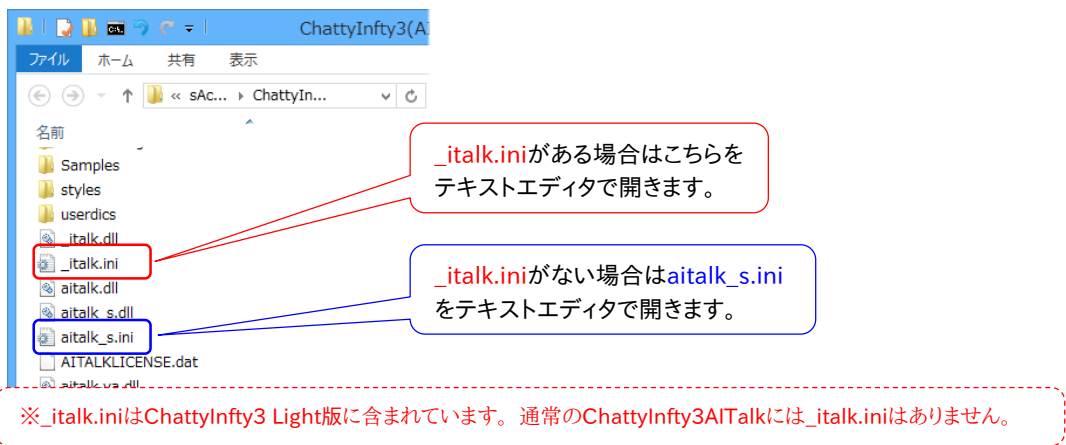

- (3). 下記の部分を修正してください。

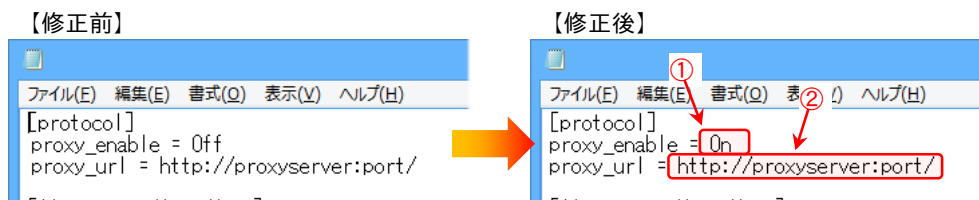

① proxy_enableの「Off」を「On」に変更します。(半角で入力)

② proxy_urlの部分にプロキシサーバーを指定します。

※ proxy_enableやproxy_urlの先頭に「;」がある場合は「;」を削除してください。

- (4). ファイルを保存してテキストエディタを終了しChattyInfty3 AITalkを起動します。

4. その他の修正

- (1). ChattyInftyの編集画面とDAISY出力結果で、化学式の読み上げが異なる場合が発生する現象を修正しました。
- (2). 「高度な表の編集画面」で、話者指定を可能にしました。操作は「書式(Q)」メニューの「話者切り替え」がショートカットキー「Ctrl+Shift+V」(通常の編集画面と同じ)です。

